


Veloce

Migliori prestazioni



Specchietti retrovisori

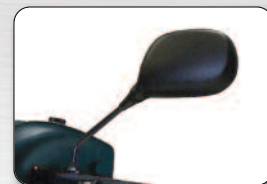

Quadro comandi



Luci "stop" posteriori



Faro integrato

Scooters

Novità importanti per uno scooter più brillante e dinamico.

Dotato di barra di torsione per terreni sconnessi e motore con una potenza massima di ben **1750 W** controllata da una centralina intelligente **Dynamic Rhino da 110 A**. Tutto questo conferisce allo scooter **Veloce** una maggior spinta per superare dislivelli, anche importanti, unitamente ad una velocità massima di **12 Km/h**. Ideale su ogni strada urbana anche grazie al suo impianto di illuminazione e al suo tasto di limitazione della velocità che permette di bloccare la velocità massima non oltre **6 Km/h**, come previsto dalle disposizioni di legge vigenti attualmente.

Carenatura in ABS disponibile in 2 colori (Apple candy red, Petroleum green)

Sedile imbottito, regolabile in altezza e profondità, girevole a 360°

Schienale reclinabile e ribaltabile con poggiatesta, rivestimento in similpelle elegante "fuoco ritardante"

Braccioli regolabili in altezza, larghezza e ribaltabili

Dispositivo di guida ergonomico, regolabile in inclinazione

Ruotine anti-ribaltamento

Paraurti anteriore e posteriore

Sistema di illuminazione con luci "stop"

Freno manuale sul comando e freno elettromagnetico

Dispositivo di limitazione della velocità in curva

Dispositivo di regolazione della velocità da 0 a 12 Km/h

Limitatore di velocità in curva e pulsante auto-limitatore a 6 Km/h

Barra di torsione per terreni sconnessi

Differenziale motore rinforzato per una migliore stabilità di guida


Struttura completamente smontabile per facilitarne il trasporto

■ **OPTIONAL: specchietti retrovisori** (non forniti di serie)



Sedile regolabile in altezza, profondità e girevole a 360°

Riferimento colore:

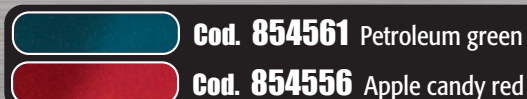

Codice ISO: 12.21.27.009 - 12.24.03.163 - 12.24.06.163 (riconguibile)
Repertorio DM SSN: 11929/R