

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

MATERASSO evAQ® - PRO II


SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)
DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI

CODICE: 002170

Cod. ISO: 04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa

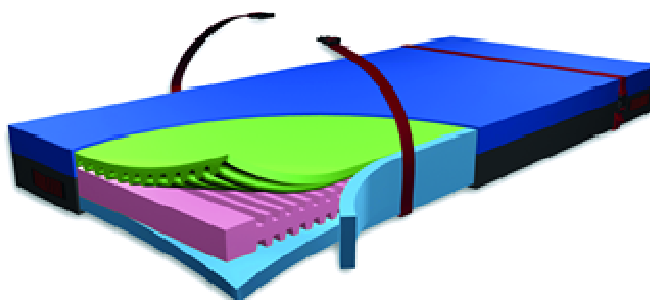

Descrizione

Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio. Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg. E' caratterizzato da un sistema di cinghie di fissaggio e maniglie che consentono ad un solo operatore di spostare rapidamente il paziente col materasso in caso d'incendio.

Caratteristiche

Il materasso è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a tre strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. E' dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. I bordi del materasso sono rinforzati, per conferire una maggiore stabilità.



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è “ricoperta”, per evitare traumi al paziente. Il materasso dispone di due (2) cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di otto (8) maniglie per lo spostamento-trascinamento.

Indicazioni cliniche

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio (classificazione EPUAP).

Specifiche tecniche

Dimensioni standard

Misure	Codice
200x90x15 cm	002170

Dimensioni disponibili su richiesta

Misure	Codice
190x90x15 cm	002172
196x86x15 cm	002171
196x105x15 cm	002174
200x100x15 cm	002173

Portata di peso

20-120 Kg



mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Ignifugicità

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

Norme di lavaggio

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile

Confezione

Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x140 circa.
Unità di confezionamento: Pz. 1

Garanzia

Il materasso è garantito 5 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.

Conformità

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi

