

SCHEDA TECNICA - MATERASSO HYPER FOAM VISCO CLINIC

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	002032 - Nr. 1667831/R
CND	

DESCRIZIONE GENERALE

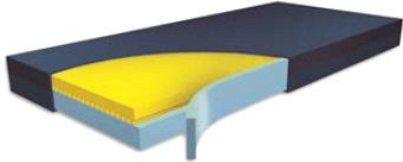
Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a medio rischio o portatori di lesioni sino al 3° stadio (classificazione EPUAP). Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg.

Il materasso è realizzato in due strati, quello superiore è in schiuma viscoelastica (memory foam), mentre lo strato inferiore è in schiuma di poliuretano, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. E' dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale.

Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio.

Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente.

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati ad medio rischio o portatori di lesioni sino al 3° stadio (classificazione EPUAP).

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Strato 1 (superiore), 30 kg/m³ schiuma di poliuretano HR (ad alta resilienza). • Strato 2, 35 Kg/m³ schiuma di poliuretano Standard. • Bordo 33 Kg/m³. • Resistenza alla compressione Strato 1 (superiore) 3kPa. • Resistenza alla compressione Strato 2 4,5kPa. • Permeabilità 78,4% rF. • Peso Kg.11. • Porata 20-140 Kg. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5. • Dimensione Standard: 200x90x14cm • Dimensioni disponibili su richiesta: 196x86x14cm; 196x105x14cm; 200x100x14cm; 220x90x14cm

NORME DI LAVAGGIO

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	STANDARD	DISPONIBILI SU RICHIESTA
	• 002032 - 200x90x14 cm	• 002036 - 196x86x14 cm • 002035 - 196x105x14 cm • 002034 - 200x100x14 cm • 002033 - 220x90x14 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1 - Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x110 circa.	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.