

SCHEDA TECNICA - MATERASSO HYPER FOAM 2 CLINIC GREENLINE

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	GR002026 - Nr: 2395857/R GR002031 - Nr: 2395867/R GR002027 - Nr: 2395877/R	GR002028 - Nr: 2395880/R GR002029 - Nr: 2395881/R GR002030 - Nr: 2395882/R
CND		

DESCRIZIONE GENERALE

Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio (classificazione EPUAP). Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg.

Il materasso (lastra unica a 3 livelli) è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a tre strati iper-elastici, a celle aperte, a densità differenziata, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto (bordi laterali di irrigidimento/contenimento) per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. E' dotato di diverse zone a settori a memorie differenziate e di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. Si può utilizzare su letti sia elettromeccanici che statici ed assicura una totale resistenza alla proliferazione di virus e batteri.


I materassi GREENLINE sono realizzati in schiuma ECOLAST®. Rispetto ai materassi antidecubito convenzionali (materassi in schiuma standard o materassi a pressione alternata) hanno emissioni di CO2 inferiori.

La schiuma ECOLAST® è una schiuma ibrida speciale. Rispetto ad una schiuma standard, la sua struttura a celle più aperte garantisce una migliore circolazione dell'aria così che il paziente possa beneficiare di un microclima ottimale.

La schiuma ECOLAST® assicura il perfetto sollievo dalla pressione e offre una maggiore resistenza.

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio (classificazione EPUAP).

IMMAGINE ARTICOLO

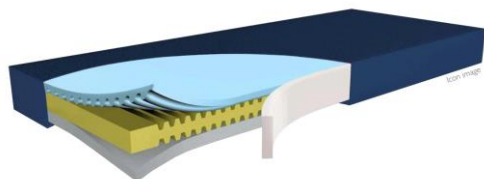

DATI TECNICI

- Densità Strato 1 (superiore), 40 kg/m³ schiuma di poliuretano HR4016.
- Densità Strato 2(intermedio), 45 Kg/m³ schiuma di poliuretano HR4530.
- Densità Strato 3(inferiore), 50 Kg/m³ schiuma di poliuretano HR5040.
- Resistenza allacompressione Strato 1: 1,6kPa.
- Resistenza allacompressione Strato 2: 3,0kPa.
- Resistenza allacompressione Strato 3: 4,0kPa.
- Peso Kg. 12.
- Portata 20-150kg.
- Copertura Ignifuga (fuoco ritardante) EN597-1 /-2 e BS 7175 sec 3 crib 5.
- Biocompatibilità EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5.
- Dimensione Standard: 200x90x15 cm
- Dimensioni disponibili su richiesta: 196x86x15cm; 196x105x15cm; 200x100x15cm; 200x120x15cm; 200x140x15cm.
- DATI TECNICI FODERA:
 - Peso: 180gr/m2 - 100%/base poliestere + laminato poliuretanico (non incollato)
 - Traspirabilità: 400gr/m2/24h
 - Lavabile e disinfettabile fino a 95°C
 - Autoclavabile: 105°C
 - Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

NORME DI LAVAGGIO

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Koch-Institute) del German Federal Ministry of Health.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	STANDARD • GR002026 - 200x90x15 cm	DISPONIBILI SURICHIESTA • GR002031 - 196x86x15 cm • GR002027 - 196x105x15 cm • GR002028 - 200x100x15 cm • GR002029 - 200x120x15 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1 - Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x140 circa.	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	7 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.