

SCHEDA TECNICA - MATERASSO evAQ® - PRO GREENLINE

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	GR002150 - Nr: 2399702/R GR002151 - Nr: 2399705/R GR002153 - Nr: 2399708/R GR002152 - Nr: 2399711/R
CND	IN ARRIVO

DESCRIZIONE GENERALE

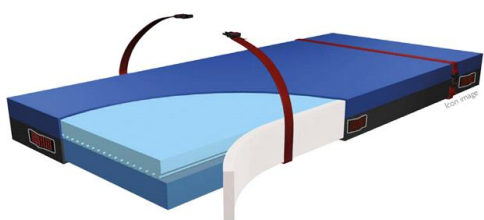
Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a medio rischio o portatori di lesioni sino al 2° stadio. Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg. È caratterizzato da un sistema di cinghie di fissaggio e maniglie che consentono ad un solo operatore di spostare rapidamente il paziente sul materasso in caso sia necessario evacuare la struttura in caso di emergenza. Il materasso è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. È dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. I bordi del materasso sono rinforzati, per conferire una maggiore stabilità. Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente. Il materasso dispone di due (2) cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di otto (8) maniglie per lo spostamento-trascinamento.

I materassi GREENLINE sono realizzati in schiuma ECOLAST®. Rispetto ai materassi antidecubito convenzionali (materassi in schiuma standard o materassi a pressione alternata) hanno emissioni di CO2 inferiori.

La schiuma ECOLAST® è una schiuma ibrida speciale. Rispetto ad una schiuma standard, la sua struttura a celle più aperte garantisce una migliore circolazione dell'aria così che il paziente possa beneficiare di un microclima ottimale.

La schiuma ECOLAST® assicura il perfetto sollievo dalla pressione e offre una maggiore resistenza.

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti a medio rischio o portatori di lesioni sino al 2° stadio (classificazione EPUAP).

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	- Densità Strato 1 (superiore), 32 kg/m³ schiuma di poliuretano. - Densità Strato 2 (inferiore), 2,30 Kg/m³ schiuma di poliuretano. - Resistenza allacompressione Strato 1 (superiore) 3,0kPa. - Resistenza allacompressione Strato (inferiore) 4,8kPa. - Peso Kg. 11. - Peso massimo utente 20-140kg. - Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5. 196x86x14 cm - 196x105x14 cm - 200x100x14 cm

NORME DI LAVAGGIO

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	- GR002150 - 200x90x14 cm - GR002151 - 196x86x14 cm - GR002153 - 196x105x14 cm - GR002152 - 200x100x14 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1 - Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x120 circa.
ACCESSORI	/
GARANZIA	3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.