

SCHEDA TECNICA - MATERASSO evAQ® - PRO II GREENLINE

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)	
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)	
CODICE ISO	04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)	
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	GR002170 - Nr. 2399687/R GR002172 - Nr. 2399688/R GR002171 - Nr. 2399689/R	GR002174 - Nr. 2399690/R GR002173 - Nr. 2399691/R
CND	IN ARRIVO	

DESCRIZIONE GENERALE

Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio. Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg. È caratterizzato da un sistema di cinghie di fissaggio e maniglie che consentono ad un solo operatore di spostare rapidamente il paziente col materasso in caso d'incendio.

Il materasso è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a tre strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. È dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. I bordi del materasso sono rinforzati, per conferire una maggiore stabilità. Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio.

Realizzata in

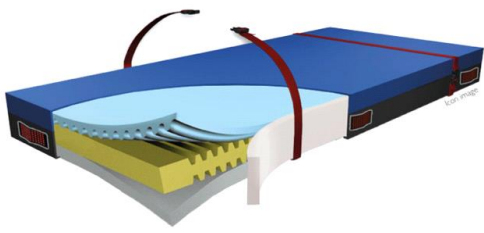
PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente. Il materasso dispone di due (2) cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di otto (8) maniglie per lo spostamento-trascinamento.

I materassi GREENLINE sono realizzati in schiuma ECOLAST®. Rispetto ai materassi antidecubito convenzionali (materassi in schiuma standard o materassi a pressione alternata) hanno emissioni di CO2 inferiori.

La schiuma ECOLAST® è una schiuma ibrida speciale. Rispetto ad una schiuma standard, la sua struttura a celle più aperte garantisce una migliore circolazione dell'aria così che il paziente possa beneficiare di un microclima ottimale.

La schiuma ECOLAST® assicura il perfetto sollievo dalla pressione e offre una maggiore resistenza.

Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti ad alto rischio o portatori di lesioni sino al 4° stadio (classificazione EPUAP)

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Densità Strato 1 (superiore), 32kg/m³ schiuma di poliuretano. • Densità Strato 2 (intermedio), 35 Kg/m³ schiuma di poliuretano. • Strato 3 (inferiore), 32 Kg/m³ schiuma di poliuretano. • Resistenza allacompressione Strato 1 (superiore) 3,0kPa. • Resistenza allacompressione Strato 2: 4,0kPa • Resistenza allacompressione Strato 3: 3,3kPa. • Peso Kg.15. • Portata massima 20-120kg. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5. • Dimensione Standard: 200x90x15 cm • Dimensioni disponibili su richiesta: 190x90x15cm; 196x86x15cm; 196x105x15cm; 200x100x15cm

NORME DI LAVAGGIO

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	STANDARD	DISPONIBILI SU RICHIESTA
	• GR002170 - 200x90x15 cm	• GR002172 - 190x90x15 cm • GR002171 - 196x86x15 cm • GR002174 - 196x105x15 cm • GR002173 - 200x100x15 cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1. Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x140 circa.	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	7 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.

Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.