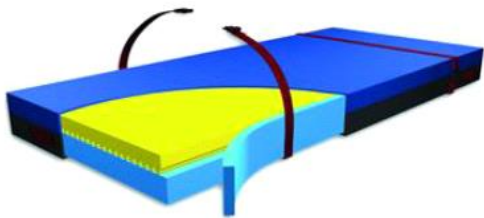


SCHEDA TECNICA - MATERASSO evAQ® - PRO VISCO

PRODUTTORE	Funke Medical Ag – Ahrenfeld 10 – 46348 Raesfeld (Germany)
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	04.33.06.006 (ex 03.33.06.006)
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	002160 -1667823/R
CND	

DESCRIZIONE GENERALE

Materasso antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati a medio rischio o portatori di lesioni sino al 2° stadio. Assicura una riduzione della pressione di contatto inferiore a 18 mmHg. E' caratterizzato da un sistema di cinghie di fissaggio e maniglie che consentono ad un solo operatore di spostare rapidamente il paziente col materasso in caso d'incendio. Il materasso è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, con intersezioni longitudinali e diagonali di supporto per conferire una migliore stabilità e comfort al paziente. La strato superiore è in viscoelastico MEMORY FOAM, dotato di un ottimo sistema di ventilazione che gli conferisce un microclima ideale. I bordi del materasso sono rinforzati, per conferire una maggiore stabilità. Il materasso è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata in PU-TEX, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture del coprimaterasso sono saldate ad ultrasuoni, la zip che ne permette la chiusura è "ricoperta", per evitare traumi al paziente. Il materasso dispone di due (2) cinture di fissaggio paziente a sgancio rapido e di otto (8) maniglie per lo spostamento-trascinamento. Materasso per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti a medio rischio o portatori di lesioni sino al 2° stadio (classificazione EPUAP).

IMMAGINE ARTICOLO	DATI TECNICI
	• Densità Strato 1 (superiore), 50 kg/m³ schiuma viscoelastica. • Densità Strato 2, 35 Kg/m³ schiuma di poliuretano Standard. • Densità Bordo 33kg/m³. • Resistenza allacompressione Strato 1 (superiore) 3kPa. • Resistenza allacompressione Strato 2: 4,5 kPa. • Permeabilità 78,4% rF. • Peso Kg.11. • Portata massima 20-120kg. • Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5. • Dimensione Standard: 200x90x14cm • Dimensioni disponibili su richiesta: 196x86x14cm; 196x105x14cm; 200x100x14cm.

NORME DI LAVAGGIO

Il materasso è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 95°C, disinfettabile.

INFO UTILI

CODICE PRODOTTO	STANDARD	DISPONIBILI SU RICHIESTA
	• 002160 - 200x90x14 cm	• 002161 - 196x86x14 cm • 002163 - 196x105x14cm • 002162 - 200x100x14cm
UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1 - Sottovuoto, in polybag termosaldato, scatola cartone cm 60x60x110 circa.	
ACCESSORI	/	
GARANZIA	3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del materasso stesso.	

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745.
Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi.
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.