

Carrozzina leggera KOMETA mod. “ADAPTIVE”

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina leggera ad autospinta sulle ruote posteriori KOMETA mod. “ADAPTIVE”

CODICE ISO: 12.22.03.006 (ex codici 12.21.06.039 - 12.24.03-121 - 12.24.06.160 - 12.24.03.118 - 12.24.21.106 - 12.24.21.109 - 12.24.21.112 - 12.24.03.115)

REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1702309/R

CND : Y122106

CODICE PRODOTTO	LARGHEZZA SEDUTA
856850	38 cm
856851	41 cm
856853	43 cm
856856	46 cm
856858	48 cm
856861	51 cm



DESCRIZIONE

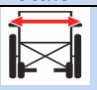

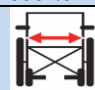





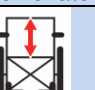


Carrozzina leggera indicata per persone con disabilità funzionale con gravi problemi di mobilità, per utilizzo interno ed esterno. Indicata per uso quotidiano nel corso della giornata, in condizioni clinico ambientali, che richiedono facile manovrabilità.

CARATTERISTICHE

- Struttura in lega di alluminio, leggera, a doppia crociera.
- Pieghevole.
- Fiancate, con braccioli imbottiti, ribaltabili (flip-up), estraibili, girevoli verso l'interno. Regolabili in altezza in 3 posizioni, completi di spondine (fiancate) laterali protetti abiti. I braccioli sono idonei per aggiunta di tavolino da lavoro con incavo, ove prescritto.
- Ruote posteriori da 24” x 1”, PU soft, ad estrazione rapida, complete di anello corrimano di spinta, dotate di freno di stazionamento con impugnatura ribaltabile ed adattabile, per favorire il trasferimento laterale.
- Ruote posteriori con perni ad estrazione rapida, spostabili in più posizioni.
- Ruote anteriori da 7” (cm 17,78) o da 8” (cm 20,32) Pu soft
- Perna ruote anteriori spostabili in più posizioni rispetto al telaio, con regolazione in inclinazione.
- Pedane (appoggia-gambe) separate, ribaltabili, regolabili in altezza ed estraibili.
Su richiesta: fornibili con imbottitura dell'appoggio polpacci
- Appoggiapiedi separate, regolabili in altezza, ribaltabili
- Sedile in materiale lavabile, impermeabile, ignifugo (fuoco ritardante)
- Schienale tensionabile a 5 fasce, lavabile, impermeabile, ignifugo (fuoco ritardante)
- Maniglie di spinta regolabili in altezza, da 36 cm a 46 cm, un foro ogni 2 cm.
- Regolazione in profondità della seduta, da 41 cm a 46 cm, tramite tubi telescopici.

- Tela sedile imbottita con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto.
- Ruotine di transito (per ascensore) e antiribaltamento in un'unica soluzione.
- Portata massima kg. 130, nella misura di seduta 48 e 51cm la portata è di kg. 150.

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza Totale	Larghezza Chiusa	Larghezza sedile	Altezza Braccioli	Altezza sedile	Altezza Totale	Lunghezza Totale	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Peso	Portata Massima
										
59	30	38	Da cm 19 a cm 24	48	Da cm 87 a cm 97	108	Da cm 41 a cm 46	Da cm 36 a cm 46	15,20	130
62	30	41		48		108			15,40	130
64	30	43		48		108			15,60	130
69	30	46		48		108			15,80	130
71	30	48		48		108			16,00	150
74	30	51	48	108	16,40	150				

OPTIONAL

- Pedane elevabili in altezza, regolabili in altezza, separate, estraibili, ribaltabili, complete di imbottitura per appoggio polpaccio
- Pedane standard, separate, regolabili in altezza, estraibili, ribaltabili, con angolatura 100°
- Tavolo con incavo avvolgente
- Prolunga dello schienale per tutte le larghezze della seduta
- Cuscinetto per lordosi
- Ruote posteriori con gommatura pneumatica

N.B. Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

CONFORMITA'

La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che risponde alle norme di sicurezza previste. Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE. La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.

