

SCHEDA TECNICA - CARROZZINA ELETTRICA KOMETA "OVERLAND"

PRODUTTORE	Merits Health Products Co Ltd - NO.18, JINGKE ROAD, T.P.M.T PARK, NANTUN DISTRICT, TAICHUNG CITY 40852, TAIWAN.
DISTRIBUTORE	Rehasense Italy srl, Viale delle Industrie 5, 20044 Arese (MI)
CODICE ISO	12.21.27.009/12.24.06.175/12.24.06.163/12.24.06.157/12.24.06.160
REPERTORIO DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)	Nr: 2289429/R
CND	Y122127

DESCRIZIONE GENERALE

Carrozzina elettrica per obesi, realizzata per uso esterno/interno, munita di 6 ruote, per grande stabilità e sicurezza.

- Telaio in acciaio verniciato epossidico, carenatura in ABS.
- Struttura di facile montaggio/smontaggio per facilitarne il trasporto.
- Schienale anatomico, imbottito, alto con appoggiatesta per il massimo del comfort, rivestimento ignifugo.
- Munita di impianto di illuminazione.
- Trazione ruote posteriori da 12" pneumatiche.
- Ideata per persone estremamente robuste e per utilizzo su terreni difficili e sconnessi, per una guida sicura grazie alle 6 ruote che consentono una grandissima stabilità.
- Munita di impianto di illuminazione.
- Braccioli regolabili in altezza e larghezza, estraibili e ribaltabili.
- Piatto pedana ribaltabile e regolabile in inclinazione.

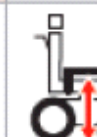
IMMAGINE ARTICOLO



DATI TECNICI

- Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 8 Km/h
- Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 32 Km ca
- Raggio di sterzata cm 53
- Ostacolo (dislivello) superabile cm 5,5 ca
- Motori nr. 2 DC 24V, potenza 200 W (minima), 575 W (massima) cad.
- Comando PG VR2 50 Ah
- Batterie: Nr. 2 da 12 V / 60 Ah ad acido assorbito
- Caricabatterie da 6 Ah
- Pendenza massima superabile 8° (14%)
- Freno elettromagnetico
- Ruote anteriori 6" x 2" PU
- Ruote motrici posteriori 12" pneumatiche
- Ruote posteriori 6" x 2" PU
- Sistema ammortizzante con sospensioni attive, indipendenti sulle singole ruote
- Larghezza sedile cm 56
- Portata max kg 205

DIMENSIONI

Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza sedile da terra	Larghezza totale	Lunghezza totale	Altezza totale	Distanza sedile-pedana	Portata massima	Peso
									
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	kg
51	46	51	56-59	66	101	127	46-51	205	96

INFO UTILI

UNITÀ CONFEZIONAMENTO	Pz. 1
ACCESSORI	/
GARANZIA	2 anni.

CONFORMITÀ

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Rehasense Italy srl.