

ECO ASSIST

POTENZIA LA TUA MOBILITA'



REHASENSE

**NUOVO
PRODOTTO**



VEDI VIDEO



ECO ASSIST

KIT DI MOTORIZZAZIONE LEGGERO



Eco Assist è il nuovo e leggero kit di motorizzazione di Rehasense, caratterizzato da un telaio in acciaio ad alta resistenza, un veloce motore con potenza massima di 1100 W e un'efficiente batteria agli ioni di litio. E' dotato di comandi regolabili, freni affidabili e presenta un design elegante e compatto. Provate il nuovo Eco Assist

CARATTERISTICHE IN SINTESI

- Sistema di aggancio manuale
- Larghezza di montaggio sulla carrozzina - da 210 a 480 mm
- Altezza di montaggio del morsetto della carrozzina da 260 a 420 mm
- Compatibile con carrozzine rigide e pieghevoli
- Disco freno da Ø 160 mm
- Funzione di deambulazione
- Controllo della trazione
- Retromarcia
- Accessorio: batteria più grande, 48V, 11,6 Ah, 556,8 Wh
- Cruise control
- Display a colori

COLORE

Nero

Forcella anteriore: Grigio scuro



DATI TECNICI

Peso totale	Peso trasporto	Portata massima	Dimensione ruota	Potenza max del motore	Coppia max del motore	Modalità di velocità	Velocità massima	Massima pendenza superabile	Batterie	Autonomia
15.5 kg	9 kg	110 kg	12"	1100 W	39 Nm	fino a 3	20 km/h*	fino a 10%	Li-on, 48 V/ 5,8 Ah/ 278 Wh	fino a 50 km

* La velocità di guida deve sempre essere adattata alle norme di legge specifiche del Paese.

POTENZA E LEGGEREZZA

Eco Assist, leggero e compatto, è molto facile da trasportare e riporre quando non viene utilizzato. Potenza e leggerezza sono la combinazione vincente


DESIGN ADATTO ALLA CITTÀ

Con un design agile ed elegante, Eco Assist si muove senza fatica negli ambienti urbani, rendendo ogni viaggio in città un'esperienza rilassante

CARATTERISTICHE E DETTAGLI INTELLIGENTI

Il display LCD a colori resistente all'acqua, il Cruise Control, la trazione antiscivolo, i fari a LED e i pulsanti del clacson migliorano l'esperienza di guida, garantendo un viaggio tranquillo e sicuro.


CARATTERISTICHE SPECIALI

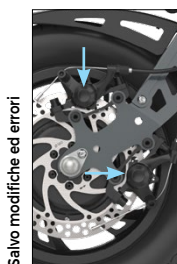

Sistema a doppio freno: freno a disco meccanico (1) e freno elettrico



I cavaletti sono regolabili in altezza per garantire il miglior adattamento al telaio da un minimo di 260 mm a un massimo di 420 mm

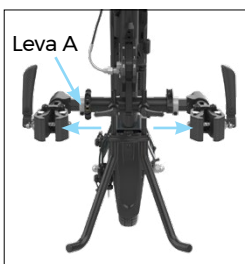


Regolazione della larghezza: utilizzare la leva A per una facile e rapida regolazione della larghezza della ganascia. Gamma di montaggio da 210 mm a 480 mm.



Smontaggio rapido per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. Per collegare o scollegare l'unità di chiusura centrale è sufficiente una semplice operazione. Un blocco di sicurezza assicura un collegamento sicuro

DISTRIBUTORE

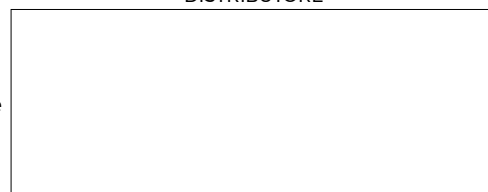

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

